

## Fotel laryngologiczny obrotowy 5104

z 1 silnikiem, elektrycznie regulowana wysokość,  
 mechanicznie regulowany obrót i oparcie



Niezawodny fotel pacjenta ogólnego użytku, szczególnie przystosowany do laryngologii innych zastosowań medycznych.

- fotel może być obracany i blokowany w dowolnej pozycji
- bezstopniowa regulacja wysokości za pomocą podwójnego przełącznika nożnego
- niewymagający konserwacji elektro-mechaniczny siłownik podnoszący fotel
- siedzisko zamontowane z niewielkim nachyleniem
- wysokie oparcie regulowane za pomocą sprężyny gazowej, może być pochylane nawet do 95°
- zagiętek posiada regulację wysokości oraz nachylenia, może być wyciągnięty całkowicie
- podnózek z rozkładaną podpórką na stopy, może być odchylony do pozycji poziomej
- dwa wygodne podłokietniki z funkcją odchylenia to przodu i do tyłu
- jednoczęściowa tapicerka przymocowana za pomocą rzepów

Opcja :

- pozycja neutralna – przełącznik nożny

**Regulacja:**


Wysokość: 510 mm-710mm

Obrót: 360°

Zagiętek: zdejmowalny, regulowane nachylenie 170°,  
 regulowana wysokość 200mm

Oparcie: kąt nachylenia w zakresie 0°~ +95°

Podnózek: składany do pozycji poziomej

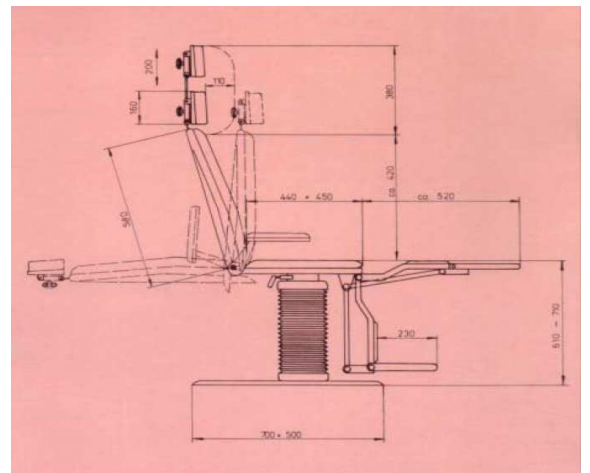

**Producent:**

Jörg & Sohn GmbH | Lindenstraße 24 | D-96482 Ahorn-Schorkendorf Niemcy

Dystrybutor: **VIDEOMED ZAKŁAD ELEKTRONICZNY**

ul. Klonowa 18 58-310 Szczawno-Zdrój

tel. +48 74 843 81 09 fax +48 74 840 17 33

web: <http://www.videomed.eu> e-mail: [handlowy@videomed.eu](mailto:handlowy@videomed.eu)

# Fotel laryngologiczny obrotowy 5101

z 1 silnikiem, elektrycznie regulowana wysokość,  
 mechanicznie regulowany obrót i oparcie




Niezawodny fotel pacjenta ogólnego użytku, szczególnie przystosowany do laryngologii i okulistyki.

- duża podstawa
- niewymagający konserwacji elektro-mechaniczny siłownik podnoszący fotel
- regulacja wysokości za pomocą podwójnego przełącznika nożnego
- fotel może być obracany o 360° i blokowany w dowolnej pozycji
- wysokie oparcie pochylane za pomocą sprężyny gazowej,
- para podłokietników o regulowanej wysokości, które mogą być obniżone poniżej wysokości poduszki siedziska
- podnóżek z rozkładaną podpórka na stopy, może być odchylany do pozycji poziomej, oraz wysunięty. W ten sposób fotel może zostać przekształcony w łóżko do badań.
- zdejmowany zagłówek z możliwością regulacji
- dostępne różne kolory tapicerki (kolory specjalne mogą wymagać dopłaty)
- elementy metalowe lakierowane (RAL 9002)

**Regulacja:**

|          |  |
|----------|--|
| Wysokość | 510 mm-810mm   |
| Obrót:   | 360°   |
| Zagłówek | zdejmowalny, regulowany w przód i w tył, regulowana wysokość |
| Oparcie  | kąt nachylenia w zakresie 0°~ +90°                           |
| Podnóżek | składany, regulowane wysunięcie 180mm                        |

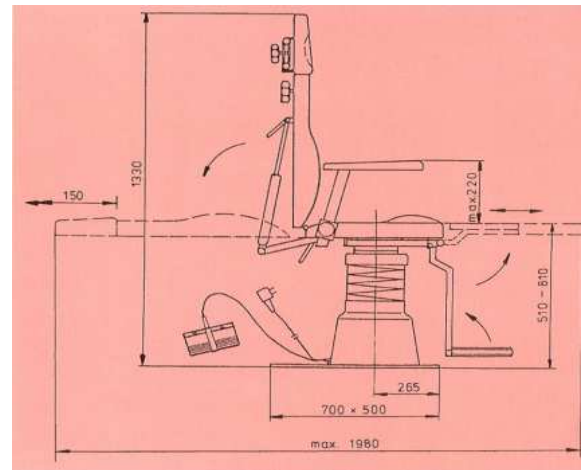

**Producent:**

Jörg & Sohn GmbH | Lindenstraße 24 | D-96482 Ahorn-Schorkendorf Niemcy

## Fotel laryngologiczny 5106

z 1 silnikiem, elektrycznie regulowana wysokość,  
mechanicznie regulowane oparcie



Niezawodny i prosty fotel pacjenta ogólnego użytku, do laryngologii oraz innych zastosowań medycznych.

- bezstopniowa regulacja wysokości za pomocą podwójnego przełącznika nożnego
- niewymagający konserwacji elektro-mechaniczny siłownik podnoszący fotel
- siedzisko zamontowane poziomo
- wysokie oparcie regulowane za pomocą sprężyny gazowej, może być pochylane nawet do 95°
- zagłówek posiada regulację wysokości, może być wyciągnięty całkowicie
- podnóżek bez regulacji
- dwa wygodne podłokietniki z funkcją odchylenia to przodu i do tyłu
- jednoczęściowa tapicerka przymocowana za pomocą rzepów

Opcja :

- pozycja neutralna – przełącznik nożny

**Regulacja:**

Wysokość: 510 mm-710mm  
Zagłówek: zdejmowalny, regulowana wysokość 200mm  
Oparcie: kąt nachylenia w zakresie 0°~ +95°  
Podnóżek: bez regulacji

**Producent:**

Jörg & Sohn GmbH | Lindenstraße 24 | D-96482 Ahorn-Schorkendorf Niemcy

---

Dystrybutor: **VIDEOMED ZAKŁAD ELEKTRONICZNY**  
ul. Klonowa 18 58-310 Szczawno-Zdrój  
tel. +48 74 843 81 09 fax +48 74 840 17 33  
web: <http://www.videomed.eu> e-mail: [handlowy@videomed.eu](mailto:handlowy@videomed.eu)