

## MICRONOMIC 50 Combi Unity laryngologiczny



MICRONOMIC COMBI to mobilny, kompaktowy unit laryngologiczny przeznaczony do stosowania w gabinetach laryngologicznych. Unity zaprojektowany jest w sposób pozwalający na rozmieszczenie maksymalnej ilości funkcji na niewielkiej przestrzeni. Szczegółowe wyposażenie Micronomic COMBI tworzone jest zgodnie z wymaganiami klienta.

Unit Micronomic COMBI posiada przegubowe, ruchome ramię pozwalające na łatwy dostęp do najczęściej używanych funkcji oraz rękojeści. Dodatkowo każda rękojeść wyposażona jest w czujnik na podczerwień, dzięki któremu automatycznie włączane i wyłączane są funkcje zintegrowane z unitem. Wiele szuflad z przegrodami i tacą maksymalnie optymalizuje przestrzeń przechowywania narzędzi. W dolnej części unitu znajdują się pojemniki na brudne narzędzia i odpady z kontenerem na śmieci. Blat zrobiony jest z sztucznego granitu MARLAN, fronty są lakierowane kolorem Metallic Silver RAL 9006. Micronomic 50 polecany jest szczególnie dla placówek medycznych przygotowanych do zintensyfikowanej opieki medycznej. Unit posiada kółka umożliwiające łatwe przemieszczanie.

---

**VIDEOMED ZAKŁAD ELEKTRONICZNY**

ul. Klonowa 18 58-310 Szczawno-Zdrój tel. +48 74 843 81 09 fax +48 74 840 17 33  
www.videomed.eu handlowy@videomed.eu



## Micronomic 50

### Funkcje zintegrowane z unitem

- Metalowa konstrukcja
- 7 szuflad do przechowywania, każda szuflada wyposażona w 2 regulowane przesgrody,
- jedna mała aluminiowa taca zamontowana na regulowanym ramieniu
- dwie duże aluminiowe tace zamontowane w specjalnych wycięciach w blacie
- pojemniki na brudne narzędzia i odpady z wycięciami umożliwiającymi łatwe wrzucenie zużytych narzędzi
- dwa gniazda 230v(+/-10%) 50Hz do podłączenia dodatkowych urządzeń
- przystosowany dla praworęcznych
- urządzenie mobilne na kółkach
- Napięcie zasilania 230v(+/-10%) 50Hz
- Standardowy kolor paneli przednich Metallic Silver RAL 9006
- Standardowy kolor obudowy, ramienia, paneli bocznych i części plastikowych biały RAL9016
  
- Wymiary

Wysokość: 90 cm., Długość: 160 cm

Głębokość: 60 cm., Waga: 120 kg (pusty)

- System ssący bez odłączanego drenu, w zestawie rękojeść, bezobsługowy, bezwibracyjny (do zastosowań z mikroskopem), filtr antybakteryjny, wydajność 70l/min, podciśnienie 0,8 bar
- Źródło światła LED w zestawie ze światłowodem z podłączeniem do endoskopu w systemie STORZ

### Opcjonalne funkcje zintegrowane z unitem

Butla ssaka z zabezpieczeniem antyprzelewowym wykonana z polysulfonu, autoklawowalna

Uchwyt MEDIVAC jako przygotowanie do montażu systemu karnistra z wkładami jednorazowymi

wskaźnik podciśnienia

regulator podciśnienia

Zestaw 5 szklanych zasobników do dezynfekcji sztywnych endoskopów

MIR-O-TEMP 1200 A podgrzewacz lusterek gorącym powietrzem

Automatyczne wyłączenie

średni czas podgrzania lusterka to około 3s

System sprężonego powietrza z rękojeścią sondą i 3 butlami Spray:

- 2-płyn, 1 proszek, z uchwytem na butelki
- Regulator ciśnienia, manometr na panelu przednim
- Automatyczna aktywacja po podjęciu rękojeści z uchwytu
- bezobsługowy
- wydajność 25l/min, max ciśnienie 2,5mbar

ENTHERMO 301-i system irygacji ciepłą wodą

37°C ustawienie temperatury wody, system ciągłego przepływu wody, Zestaw przyłączeniowy do instalacji wodnej, 1 prosta kaniula, 1 zakrzywiona kaniula

Filtr 5 micronów dla Entermo301-I – umożliwi dłuższą żywotność

Entermed System kamery wysokiej rozdzielczości:

podłączenie USB3.0

rozdzielczość 1280x720p (60fps)

Sensor obrazu 1/2,9" Sony CCD


Oprogramowanie do obrazowania ( bez bazy danych)

Przycisk nożny do zatrzymania trzech obrazów, filmu i balansu bieli.

---

## VIDEOMED ZAKŁAD ELEKTRONICZNY

ul. Klonowa 18 58-310 Szczawno-Zdrój tel. +48 74 843 81 09 fax +48 74 840 17 33  
www.videomed.eu handlowy@videomed.eu

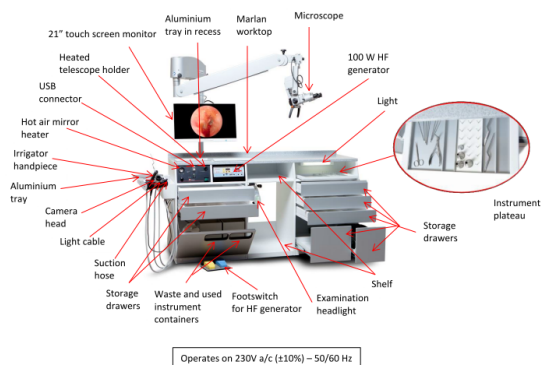

Sprzęgacz HD C-mount f-28mm, wodoodporny

Zintegrowany dedykowany komputer, z gniazdem USB w konsoli:

- Procesor Intel i7 QuadCore 3.2Ghz
- Karta video: Onboard Intel Iris PRO Graphics 5200
- Pamięć: Kingston 8GB DDR3 1600Mhz SODIMM, type KVR16LS11/8 Low Voltage
- Dysk: Western Digital BLACK WD7500BPKX 2.5" SATA3
- OS: Windows 7 PRO PL OEM 64BIT SP1
- Klawiatura bezprzewodowa, Rapoo E2800, biała z zintegrowaną płytką dotykową, ładowana z USB, Li-ion bateria
- Oprogramowanie do komunikacji z wbudowanym firmwarem unitu
- Podłączenie do funkcji kontroli włączania/wyłączania w unicie Micromatic

21" Full HD dotykowy monitor

- Podświetlenie LED
- kontrast dynamiczny 5 000 000:1
- czas odpowiedzi 5 ms
- rozdzielczość 1920x1080 pikseli
- matowy

Kolumna monitora z zamontowanym uchwytem.

Enterscope laryngoskop 90° , 8 mm diameter, długość robocza 175 mm.

Enterscope otoskop 0° , 4 mm diameter, długość robocza 50 mm

Enterscope sinusoskop 30° , 4 mm, długość robocza 175 mm

Światłowód , 2,30 m