

ALLTION®



AM-6000 Mikroskop chirurgiczny

Lider mikroskopów segmentu C

4 unikalne cechy wyróżniające AM6000

23mm okular dla większego pola widzenia

Łatwiejsze dopasowanie i lepszy komfort użytkowania

Mikroskopy innych firm posiadają okular o średnicy 18mm lub 21mm, Jest to niekomfortowe i trudno ustawić stereoskopowe widzenie

Wbudowany sprzęgacz optyczny

Nie generuje dodatkowych kosztów, przy chęci podłączenia okularu asystenckiego lub aparatu fotograficznego

Wbudowana w pełni funkcjonalna kamera


Kompaktowa ale z wieloma funkcjami

Nie tylko filmy i fotografie, lecz również pomiary, kontrast i inne funkcje do twojej dyspozycji

Płynny współczynnik powiększenia 1:8 (ZOOM)

Powiększenie całkowite 3.4-27.7x


Skokowa zmiana powiększeń nie pozwala idealnie dopasować się do pola operacyjnego, standardowy zoom 1:6 ma po prostu mniejszy zakres regulacji

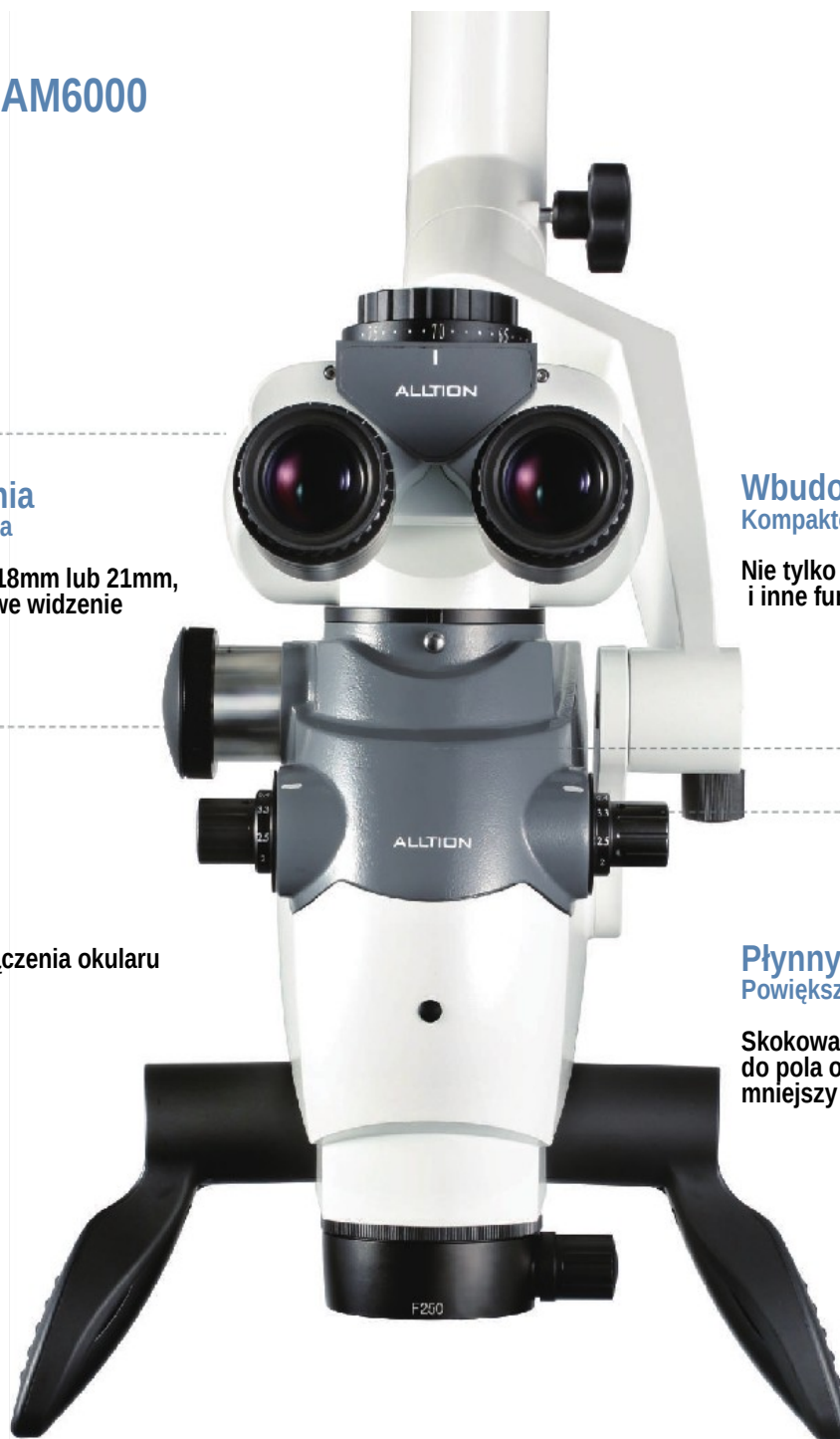

Wbudowana w pełni funkcjonalna kamera Ergonomiczna i wszechstronna, zaprojektowana do zapisu obrazów i wideo



Reguluj kolory, jasność, kontrast i inne parametry w zależności od potrzeb

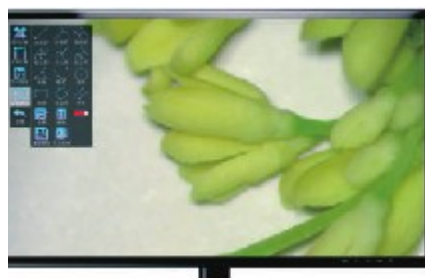

Porównuj obrazy zdjęcie-zdjęcie, zdjęcie-obraz na żywo bezpośrednio w kamerze



Trzy sposoby wyzwalania zapisu

Łączy jakość i ergonomię

Ergonomiczna regulacja balansu

Regulacja balansu realizowana pokrętkiem
Bardzo intuicyjne dopasowanie mikroskopu

950mm ruchome ramię

Długość ramienia pozwala na łatwe dopasowanie
się do wielu układów wyposażenia gabinetu

Personalizacja wyglądu

Na okrągłej plakietce można nadrukować
Logo, dane placówki, dystrybutora

Pokrętła cierne

Są bardzo precyzyjnie regulowane,
Umożliwiają wygodną pracę


Świecące logo

Pozwala na wyświetlenie błędów układu
elektrycznego mikroskopu



Wbudowane przewody

Przewody zasilające i HDMI zabudowane są w
kolumnie, ramieniu i podstawie.

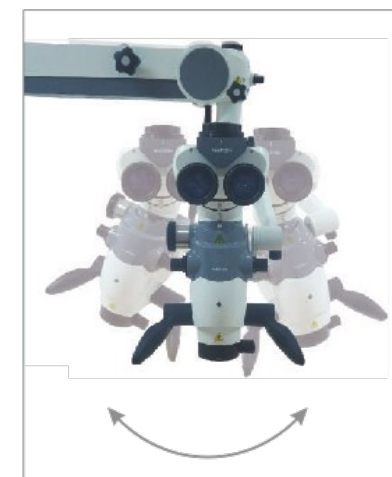

Przedłużacz okularu 45° i obrotowy
adapter pozwalają na pracę przy każdym
położeniu głowy

Rękojeść

360° regulowana po wciśnięciu
można ustawić rękojeść w każdej
pozycji. Bardzo łatwa w obsłudze.
Rękojeści są demontowalne do
sterylizacji, nie ma konieczności
stosowania jednorazowych
nakładek.

AM6000

Wspaniałe wzornictwo i proces produkcji

Kompaktowy

Regulowane ramię zachodzi na pierwsze ramię mikroskopu. Pozwala to zaoszczędzić przestrzeń w gabinecie.



Pin antykolizyjny

Specjalnie zaprojektowane zabezpieczenie przed kolizją ramion mikroskopu

Niezawodny

Oslony zostały wykonane z ekologicznego i bardzo odpornego materiału jakim jest ABS. Jest on odporny na starzenie jak i na środki myjące.

Technologia

Wiele elementów wewnętrznych mikroskopu zostało wykonanych z aluminium 60601.