


Jednorazowe bronchofiberoskopy Intent - Procesor

Przetwarzanie, wyświetlanie i rejestrowanie obrazu



Specyfikacja	
Model	VLM-03
Rozmiar wyświetlacza	8 cali
Waga	1,0 kg
Składowanie	32 GB
Rozdzielczość wyświetlacza	1024*768 pikseli
Pojemność wyjścia wideo	HDMI, 1920*1080 pikseli
Pojemność baterii	6400 mAh
Czas pracy baterii	Do 4 godzin

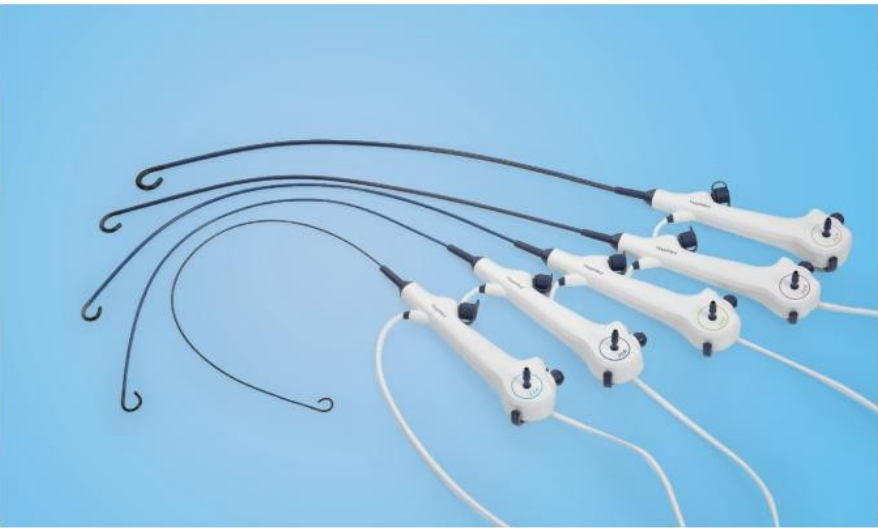

Broszura
Jednorazowego użytku
Bronchoskop



Informacje o zamówieniu

Produkt	Kod przedmiotu
Bronchoskop jednorazowy	
BR-M22	2016B-PA005
BR-M32	2016B-PA004
BR-M40	2016B-PA003
BR-M50	2016B-PA001
BR-M58	2016B-PA006
Procesor obrazu	
VLM-03	2021B-PA003

Dane techniczne, konstrukcja akcesoria mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia i bez jakichkolwiek zobowiązań strony producenta.

HugeMed

Shenzhen HugeMedMedical TechnicalDevelopment Co., LTD.
6F, Bloka, BudynekTempus, 1st QingshuiheRoad, Dzielnica Luohu, MiastoShenzhen, Guangdong,Chiny.
+86-755-22275833 +86-755-22275833 info@hugemed.net

Więcej informacji
Proszę odwiedzić nasząstronę
internetową: www.hugemed.net



HugeMed

P/N: ENG-EU-CATA-fBRS-suBR-INTENT-202306V1.0

Optymalny

Bronchoskopia przyłózkowa

Rozwiązanie



Przenośny

- Lekki i kompaktowy;
- Szczególnie przydatne do codziennych badań na oddziale intensywnej terapii.



Oplącalny

- Podnosi wskaźnik przepływów pieniężnych;
- Brak kosztów utrzymania;
- Brak kosztów dezynfekcji.



Brak zakażeń krzyżowych

- Jednorazowy, jeden zakres dla jednego pacjenta, bez infekcji krzyżowych



Zawsze gotowy do drogi

- Nie ma potrzeby czekania na ponowne przetwarzanie, zawsze dostępne dla Twoich potrzeb.



Więcej rozmiarów

Więcej możliwości

Huge Med Intent to seria jednorazowych bronchofiberoskopów dostępnych w pięciu różnych modelach, dopasowanych do różnych potrzeb klinicznych. W konstrukcji serii zastosowano nowoczesny, Ultra kompaktowy czujnik CMOS, który pozwolił na zmniejszenie wymiarów zewnętrznych urządzeń przy jednoczesnym zachowaniu dużych kanałów roboczych. To innowacyjne rozwiązanie otwiera przed użytkownikami jeszcze więcej możliwości, zwiększając komfort i skuteczność przeprowadzanych procedur.

Bronchoskop jednokrotnego użytku

Seria BR[™]
BR-M58
5,8/3,4 mm

Seria BR[™]
BR-M50
5,0/2,8 mm

Seria BR[™]
BR-M40
4,0/2,0 mm

Seria BR[™]
BR-M32
3,1/1,2 mm

Seria BR[™]
BR-M22
2,2/0 mm

Ugięcie: 210° góra/dół
Długość robocza: 600 mm
Pole widzenia: 120°

Chip na końcu CMOS+LED

Ergonomiczna konstrukcja Łatwość użytkowania

Intensywne zginanie 210° w górę/w dół

Jednorazowego użytku Wysterylizowany

BR-M22 4,0/2,0 mm BR-M32 3,1/1,2 mm BR-M40 2,2/0 mm BR-M50 5,0/2,8 mm BR-M58 5,8/3,4 mm

MODELE SLIM

- Intubacja lub badanie dróg oddechowych u osób małych;
- Sprawdzenie położenia rurki DL;
- Dotrzyj do mniejszych oskrzeli w celu sprawdzenia czynności obwodowych płuc lub przeprowadzenia terapii.

RUTYNOWE MODELE

- Rozmiar BR-M40 i BR-M50 pozwala na przejście przez większość dróg intubacyjnych dla dorosłych, co jest odpowiednie do rutynowego stosowania intubacji i bronchoskopii przyłózkowej terapii. Grubość rurek wprowadzających zapewnia większą manewrowość, gdy przeprowadzanie operacji.

MODELE TERAPII

- Zakresy, których kanały robocze są zwykle większe niż 2,8 mm, są zazwyczaj definiowane jako modele terapeutyczne. HugeMed BR-M58[™] ma bardzo drobny kanał roboczy o średnicy 3,4 mm, który zapewnia o 28,5% więcej miejsca niż grubość 3,0 mm i o 47,4% więcej niż grubość 2,8 mm.



BR-M50
5,0/2,8 mm

Porównaj z innymi giętkimi bronchoskopami których średnica zewnętrzna wynosi około 5,0 mm, ale kanał roboczy jest mniejszy niż 2,6 mm BR-M50 towszechstronny bronchoskop z standardowa średnica zewnętrzna, ale duży kanał roboczy co niesie za sobą następujące korzyści:

- Możliwość dotarcia do mniejszych oskrzeli;
- Dostosuj się do większej liczby rozmiarów ETT/DLT;
- Większa moc ssania.