

Fotel laryngologiczny i wielofunkcyjny Francy O



Fotel o wysokiej wydajności pod względem funkcjonalności i komfortu w połączeniu z nowoczesnym i eleganckim wzornictwem. Konstrukcja stalowa całkowicie lakierowana proszkiem epoksydowym o właściwościach antybakteryjnych. Francy O posiada 4 silniki niskiego napięcia do regulacji wysokości, oparcie, regulacji nóg oraz do ustawienia pozycji Trendelenburga. Ręcznie składane podnóżki, podłokietniki wykonane są z poliuretanu. Fotel posiada ergonomiczny kształt. Można go rozłożyć do funkcji leżanki.

Bardzo duża nośność: 230 kg. Siedzisko obraca się o 90° w prawo i 90° w lewo z ręczną blokadą (całkowity obrót siedziska o 180°). Standardowy zestaw 4 kół z hamulcem nożnym. Sterowanie elektryczne jest obsługiwane przez panel przycisków, dodatkowo za pomocą przycisku nożnego można regulować wysokość. Fotel jest specjalistycznym fotelem laryngologicznym, ale jest również szeroko stosowany do ogólnej diagnostyki.

Parametry techniczne:

- Nośność: 230 kg
- Stopień ochrony: IP54
- Waga: 143 kg
- Obrót siedziska +/-90stopni
- Uchwyt na papier
- Uchwyt na kroplówkę
- Pilot ręczny z pamięcią 4 pozycji (2 zaprogramowane, 2 do zapisania przez użytkownika)


Akcesoria opcjonalne:

- Pedal nożny do regulacji wysokości
- Bateria do niezależnego zasilania bateryjnego
- Regulowany zagłówek
- Szyna na akcesoria na oparciu fotela
- Wspornik tacy wraz z tacą



Wymiary:

A.	570±955 mm
B.	1420±1805 mm
C.	1350 mm
D.	955 mm
E.	1785 mm
F.	0°÷ -10° mm
G.	765 mm
H.	570 mm
I.	-3°÷ -87° mm
J.	0°÷ 90° mm

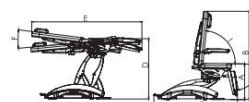

Videomed ul. Klonowa 18 58-310 Szczawno-Zdrój

www.videomed.eu info@videomed.eu tel. 748432829 / 508349875